

**Partículas Hemostáticas
Absorvíveis Surgiclean MPH**

À base de plantas
100% absorvível
Seguro - Eficaz
Fácil de usar



CERTIFICADO E HONRA

As Partículas Hemostáticas Absorvíveis e o Aplicador Surgiclean MPH receberam certificados de patente emitidos pelo Escritório Estadual de Propriedade Intelectual da China em 2006 e 2014, respectivamente. As Partículas Hemostáticas Absorvíveis foram reconhecidas como "Produtos Fabricados de Alta Qualidade de Zhejiang" e "Produtos Industriais Excelentes de Zhejiang". Além disso, receberam o Prêmio de Criatividade no Prêmio de Excelência e Inovação em Fabricação da China em 2019.

PARTÍCULAS HEMOSTÁTICAS ABSORVÍVEIS SURGICLEAN MPH

As partículas hemostáticas absorvíveis de polissacarídeos micro porosos Surgiclean MPH são preparadas com fécula de batata como matéria-prima, utilizando a tecnologia de emulsificação e reticulação. Elas podem absorver e bloquear a água instantaneamente, formando géis com propriedades hidrofílicas da peneira molecular.



INTRODUÇÃO

As Partículas Hemostáticas Absorvíveis Surgiclean MPH são aplicadas no local da ferida cirúrgica como um agente absorvível para interromper o sangramento em veias e pequenas artérias, quando procedimentos convencionais como ligadura e pressão se mostram ineficazes. O Surgiclean pode interromper o sangramento com sucesso em questão de segundos. O tempo específico depende da quantidade aplicada e do local que está sendo tratado.

SURGICLEAN

Seguro | Eficaz | Fácil de usar

100% à Base de Plantas

Livre de Componentes de Origem Animal ou Humana, reduzindo os riscos de reação a corpo estranho e infecção.

Sem Resíduos

Surgiclean degrada-se em maltose e glicose por amilase e a-glicosídeo, tornando-se água e dióxido de carbono. Total absorção em 14 dias.

Dobro

de hemostasia-mecânica, conectando e acelerando o mecanismo de coagulação endógena.

Mecanismo de Dupla Ação

Ultra-hidrofílico para melhoria e aceleração da cascata de coagulação com a formação de um gel matriz que cria uma barreira mecânica para evitar sangramentos.

Fácil


aplicação em feridas irregulares e complexas.

Sem

necessidade de preparação ou armazenamento especial. Facilidade de uso garantida.

FORMAÇÃO DE COÁGULOS SANGUÍNEOS


A força do coágulo sanguíneo é 2-3 vezes maior que a do coágulo sanguíneo fisiológico.

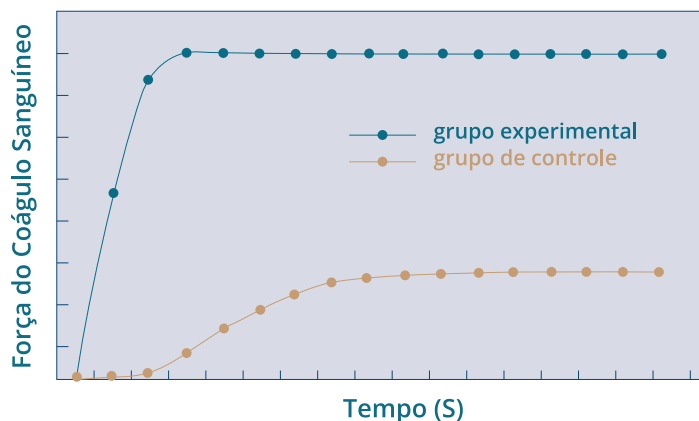

Comparação de dados para alcançar a maior eficácia na formação de coágulos sanguíneos

GRUPO	TEMPO REQUERIDO (S)	VALOR DE FORÇA DO COÁGULO SANGUÍNEO (MM)
GRUPO EXPERIMENTAL	3	68±17
GRUPO DE CONTROLE	10	27±15

A taxa de sucesso da hemostasia em 3 minutos é maior que a de outros hemostáticos.

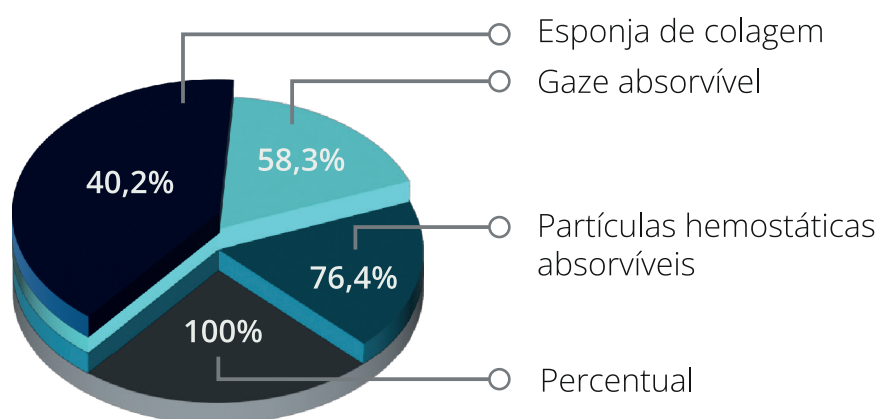

Dosagem

A dosagem máxima não deve exceder 5g por pessoa de cada vez.

Validade

3 anos.

Especificações

1,0g / peça, 2,0g / peça, 3,0g / peça, 5,0g / peça.

Marca	Modelo nº	Especificações
S JRGICLEAN	1,0g	1,0g / peça
	2,0g	2,0g / peça
	3,0g	3,0g / peça
	5,0g	5,0g / peça

CAMPOS DE APLICAÇÃO

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

CIRURGIA TORÁXICA

CIRURGIA HEPATOBILIAR

CIRURGIA ORTOPÉDICA

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA DE QUEIMADURA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA ESTÉTICA

CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA

CIRURGIA DE BUCOMAXILO



Cirurgia de Ressecção de Tumor Adrenal



Cirurgia de Câncer de Esôfago

Dicas

(1) Dosagem:

Geralmente, cada grama de pó hemostático Surgiclean pode tratar 1 cm do local da ferida operatória com espessura média de 1 mm.


(2) Controle de sangramento e redução da drenagem pós-operatória:

Para controlar o sangramento e reduzir a drenagem pós-operatória, limpe o fluido pós-operatório da ferida.

Pulverize o Surgiclean em pequena quantidade, de maneira uniforme, de acordo com os níveis e a sequência de fechamento da cirurgia.


TÉCNICA DE APLICAÇÃO

1

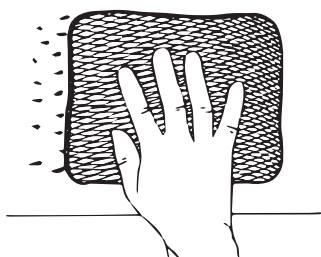


Remova o excesso de sangue utilizando uma esponja asséptica ou gaze para expor os locais de sangramento.

2

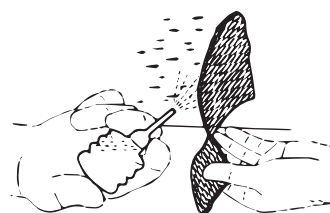


Aplicar imediatamente o pó hemostático Surgiclean na ferida, cobrindo completamente a área afetada.

3

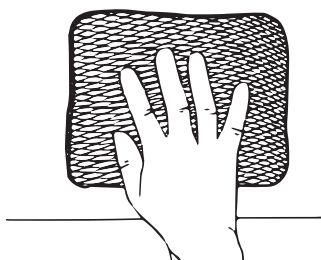

Pressione a ferida com uma gaze seca por 2 a 3 minutos.

4

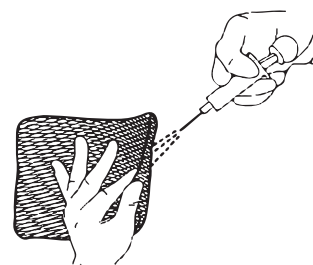

Irrigue o excesso de pó assim que o sangramento parar e remova a gaze. Se o sangramento ou secreção continuar, repita os métodos acima.