



TEKCEM® 1G&3G

Cimento cirúrgico com antibiótico

TEKCEM® 1G&3G são cimentos ortopédicos radiopacos com Gentamicina

- Contém Gentamicina, um antibiótico aminoglicosídeo.
- Dedicado às artroplastias primárias, de revisão e pacientes com alto índice de infecção.
- Permitem imediata estabilização e fixação dos implantes.
- Atendem às necessidades dos cirurgiões, com 2 viscosidades e 2 tipos de aplicações:

TEKCEM® 1G: cimento ortopédico com viscosidade normal, para aplicação manual.

TEKCEM® 3G: cimento ortopédico de baixa viscosidade, com ótima fluidez, para fácil aplicação com seringa.

Indicações

Os cimentos TEKCEM® G e TEKCEM® 3G com gentamicina são cimentos ósseos indicados para as intervenções de artroplastia do quadril, do joelho e outras articulações, para fixar implantes protéticos plásticos e metálicos ao osso para as cirurgias de reconstrução, em revisões de artroplastias infectadas.

Estes cimentos são indicados para a fixação de próteses por segunda intenção, para a substituição de próteses infetadas em dois tempos após o tratamento inicial da infecção

Importado e distribuído por

 **amplitude**

 **Teknimed**

TEKCEM® 1G&3G

Características dos cimentos



- Propriedades mecânicas superiores à ISO 5833
- Baixa exotermia durante o endurecimento
- Baixa liberação de monômeros
- Fixação estável dos implantes
- Sulfato de Bário como agente radiopaco
- Fácil preparação na mistura manual.

Cimento TEKCEM® G promove antibioticoterapia local.

Gentamicina, da família dos aminoglicosídeos, tem um amplo espectro e é efetivo contra a maior parte das bactérias existentes.

A quantidade de Gentamicina contida em uma dose de cimento é otimizada para garantir liberação à longo prazo, curando ou prevenindo infecções.

Propriedades mecânicas superiores à norma ISO 5833 standard¹ :

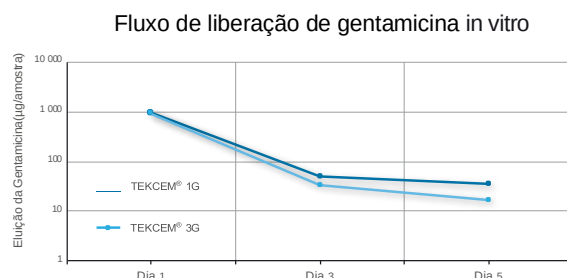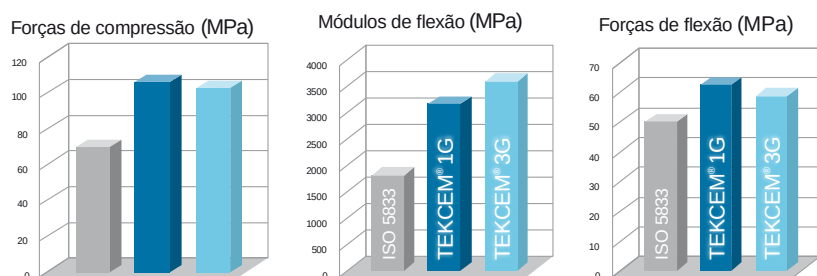

(1) Reports internos - Mecânicos: CL021913 - TEKCEM 1 - Flexão: CL021813 - Fluxo de liberação: CLAV021921

Armazenamento & produtos

Os cimentos ortopédicos são oferecidos estéreis. Devem ser armazenados em embalagem original, inviolada, em local seco e limpo, longe da luminosidade e em temperatura máxima de 25°C. Para informações adicionais, consulte as informações de uso.

	TEKCEM® 1G (% p/p)	TEKCEM® 3G (% p/p)
Composição líquida	14.4g	16.4g
Metacrilato de metila	84.4	84.4
Metacrilato de butila	13.2	13.2
N, N Dimetil-p- toluidina	2.4	2.4
Hidroquinona	20 ppm	20 ppm
Composição pó	41.6g	41.6g
Polimetilmetacrilato	84.3	84.3
Peróxido de Benzóilo	2.3	2.3
Sulfato de Gentamicina (correspondente à 1g de base)	3.8 (1.6g)	3.8 (1.6g)
Sulfato de Bário	9.6	9.6

DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

TEKCEM® 1G B040140G
41.6 g de pó e 14.4 g de líquido

TEKCEM® 3G B040340G
41.6 g de pó e 16.4 g de líquido

Classe III



DESIGNAÇÃO REFERÊNCIAS

KIT BOWL &
ESPATULA
Pacote com 10un não
estéreis



T060404



Sede:
8 rue du Corps Franc-
Pommiès 65500 VIC en
BIGORRE (France) Tél (33) 5
62 96 88 38

Administração e escritório de
compras:
Z.I de la Herray
65500 VIC en BIGORRE (France)
Tél (33) 5 62 96 88 38

Departamentos
de vendas e
engenharia:
Z.I. de Montredon, 11-12 rue d'Apollo
31240 L'UNION (France)
Tél (33) 5 34 25 10 60

Fabricado por

